


DESCRIPTION :

Ceinture lombaire comportant des sangles dorsales croisées pour apporter un soutien supplémentaire.
Textile testé et contrôlé par l'Institut Français du Textile

CARACTERISTIQUES:

- 4 baleines en partie dorsale et 2 baleines abdominales aident le patient à adopter une posture correcte en limitant les mouvements latéraux et la rotation du tronc,
 - Deux sangles dorsales croisées reproduisant la musculature de la région lombaire. Cette structure exerce une meilleure extensibilité et une meilleure tension lors de la pose.
 - Passe-main pour une fermeture aisée et un ajustement au plus près du corps,
 - Confection en tissu côtelé, élastique et aéré, qui régule la sudation sous la ceinture,
 - Le tissu extensible épouse les formes du corps en accroissant le confort,
 - Conçue en matériaux bien tolérés par la peau : ne contient pas de latex naturel.
- Ne contient pas de latex naturel,
 - Ne contient pas de phthalate.

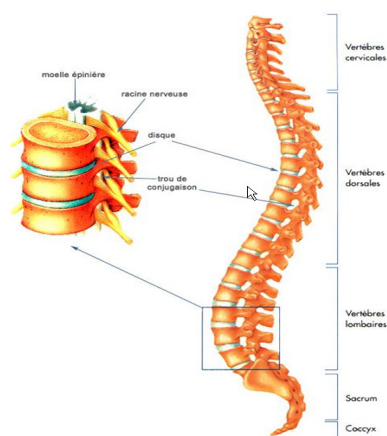

INDICATIONS:

Lombalgies aiguës et chroniques,
Problèmes dégénératifs du dos,
Douleurs sévères dans la région lombaire,
Douleurs dorsales liées à l'ostéoporose,
Lombalgies consécutives à une insuffisance musculaire,
Maintien post-chirurgical.

MODE D'EMPLOI:

Il est conseillé de porter la ceinture par dessus un vêtement léger.

1. Veillez à ce que la ceinture soit positionnée correctement, L'étiquette portant l'indication « Top » doit être dirigée vers le haut,
2. A l'aide de passe-main ventral, ajustez la ceinture autour du corps, en appliquant la contention désirée,
3. Evitez la formation de plis,
4. A l'aide du passe-main afin ajustez le maintien,
5. Si nécessaire et selon les besoins, ajustez la tension. La ceinture est bien en place lorsque vous éprouverez une sensation de stabilité.

PARTICULARITES D'UTILISATION:

-

PRECAUTIONS D'EMPLOI:

- En cas de gonflement anormal ou d'inconfort durant le port de la ceinture, retirez la ceinture et consultez immédiatement votre médecin traitant,
- Veuillez respecter scrupuleusement les indications thérapeutiques et recommandations du professionnel de santé qui vous a prescrit ou délivré la ceinture,
- Toute plaie ouverte ou zone infectée doit être recouverte au préalable par des pansements adéquats.
- En cas de sudation excessive, prendre contact avec votre médecin traitant,

ENTRETIEN :

Actimove® LombaCare-X se lave à la main ou en machine (programme à 30° C - textiles fragiles). Avant lavage, veuillez toujours refermer la bande auto-agrippante. La ceinture ne doit pas être passée à l'eau de javel, nettoyée à sec, séchée par sèche-linge ou repassée. La ceinture doit être totalement sèche avant d'être ré-utilisée.

CONTRE-INDICATIONS:

Sensibilisation aux produits de synthèse
Blessures dorsales graves

CONDITIONNEMENT:

Boîte carton individuelle

Les dimensions ci-dessous se comprennent en tour de taille :

Présentation pharmacie et hôpital avec vignette LPPR

| EAN13 | ACL7 | Référence (*) | Dimensions | Unité de cde | Carton stand. | Code LPPR |
|---------------|---------|----------------|------------------|--------------|---------------|------------|
| 4042809265712 | 4708368 | 73451-09000-00 | 52-62 cm / XS | 1 | 12 | 201E00.022 |
| 4042809265736 | 4708374 | 73451-09001-00 | 63-74 cm / S | 1 | 12 | 201E00.022 |
| 4042809265750 | 4708380 | 73451-09002-00 | 75-89 cm / M | 1 | 12 | 201E00.022 |
| 4042809265774 | 4708397 | 73451-09003-00 | 90-120 cm / L | 1 | 12 | 201E00.022 |
| 4042809265798 | 4708405 | 73451-09004-00 | 106-120 cm / XL | 1 | 12 | 201E00.022 |
| 4042809265811 | 4708411 | 73451-09005-00 | 121-140 cm / XXL | 1 | 12 | 201E00.022 |

(*) les 2 derniers chiffres sont mentionnés à titre indicatif (internes à BSN medical)

STERILISATION:

Livrée non stérile

BSN medical SAS
57, boulevard Demorieux
F - 72058 LE MANS Cedex 2
Tél.: 02 43 83 40 40
Fax: 02 43 83 40 41

CONTACT PHARMACIE :

N° Vert : 0 800 302 282



- Système de Management certifié
- EN ISO 9001
- EN ISO 13485